


**Mic-Key®**

## Mic-Key TJ – Transgastrisk Jejunal ernæringssonde

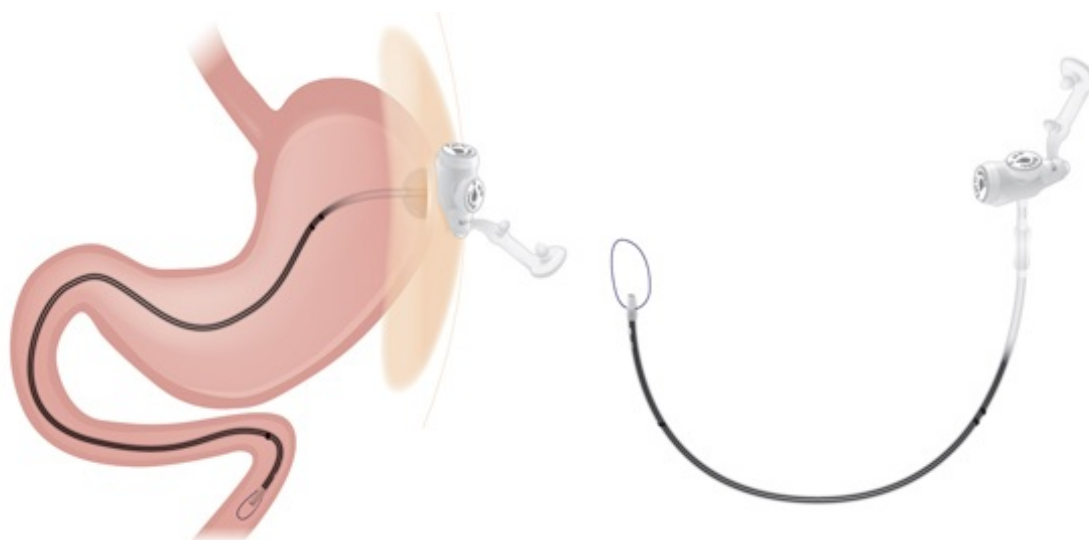

Mic-Key TJ har 2 løp: 1 til ventrikkel og 1 til jejunum. Den ser ut som en lavprofil Mic-Key, og har samme tilbakeslavsventil og mellomstykker som Mic-Key. Den leveres med 1 stk Medisineringsmellomstykke (artikkelnr 141-12) og 1 stk. Bolus rett mellomstykke (artikkelnr 143-12). Sonden har et langsgående lodd (det sorte området) som gjør sonden tyngre. Dette er med å forebygge at sonden kommer ut av posisjon/ «kryper oppover» til ventrikkel.

Med Mic-Key TJ kan man ernære jejunalt, men har en også mulighet til ernæring/tømming/utluftning av ventrikkelen. Man bør velge den totale lengden på sonden, med utgangspunkt i at den distale lengden kommer 10-15 cm forbi det Treitze ligament.

Mic-Key TJ finnes i størrelsene 16 Fr, 18 Fr og 22 Fr, stomalengder fra 1,0 til 3,5 cm og i jejunale lengder 15, 22, 30 og 45 cm.

### Tabell

Artikkelnummer ENFit	Tykkelse	Stomalengde	Jejunal lengde
8270-16-1.0-15	16 Fr	1.0 cm	15 cm
8270-16-1.0-22	16 Fr	1.0 cm	22 cm
8270-16-1.2-15	16 Fr	1.2 cm	12 cm
8270-16-1.2-22	16 Fr	1.2 cm	22 cm
8270-16-1.2-30	16 Fr	1.2 cm	30 cm
8270-16-1.5-15	16 Fr	1.5 cm	15 cm
8270-16-1.5-22	16 Fr	1.5 cm	22 cm
8270-16-1.5-30	16 Fr	1.5 cm	30 cm
8270-16-1.5-45	16 Fr	1.5 cm	45 cm
8270-16-1.7-15	16 Fr	1.7 cm	15 cm

8270-16-1.7-15	16 Fr	1.7 cm	15 cm
8270-16-1.7-22	16 Fr	1.7 cm	22 cm
8270-16-1.7-30	16 Fr	1.7 cm	30 cm
8270-16-1.7-45	16 Fr	1.7 cm	45 cm
8270-16-2.0-22	16 Fr	2.0 cm	22 cm
8270-16-2.0-30	16 Fr	2.0 cm	30 cm
8270-16-2.0-45	16 Fr	2.0 cm	45 cm
8270-16-2.3-30	16 Fr	2.3 cm	30 cm
8270-16-2.3-45	16 Fr	2.3 cm	45 cm
8270-16-2.5-30	16 Fr	2.5 cm	30 cm
8270-16-2.5-45	16 Fr	2.5 cm	45 cm
8270-16-2.7-30	16 Fr	2.7 cm	30 cm
8270-16-2.7-45	16 Fr	2.7 cm	45 cm
8270-16-3.0-45	16 Fr	3.0 cm	45 cm
8270-16-3.5-45	16 Fr	3.5 cm	45 cm

Artikkelnummer ENFit	Tykkelse	Stomalengde	Jejunal lengde
8270-18-1.2-22	18 Fr	1.2 cm	22 cm
8270-18-1.2-30	18 Fr	1.2 cm	30 cm
8270-18-1.5-22	18 Fr	1.5 cm	22 cm
8270-18-1.5-30	18 Fr	1.5 cm	30 cm
8270-18-1.5-45	18 Fr	1.5 cm	45 cm
8270-18-1.7-22	18 Fr	1.7 cm	22 cm
8270-18-1.7-30	18 Fr	1.7 cm	30 cm
8270-18-1.7-45	18 Fr	1.7 cm	45 cm
8270-18-2.0-22	18 Fr	2.0 cm	22 cm
8270-18-2.0-30	18 Fr	2.0 cm	30 cm
8270-18-2.0-45	18 Fr	2.0 cm	45 cm
8270-18-2.3-30	18 Fr	2.3 cm	30 cm
8270-18-2.3-45	18 Fr	2.3 cm	45 cm
8270-18-2.5-30	18 Fr	2.5 cm	30 cm
8270-18-2.5-45	18 Fr	2.5 cm	45 cm
8270-18-2.7-30	18 Fr	2.7 cm	30 cm
8270-18-2.7-45	18 Fr	2.7 cm	45 cm
8270-18-3.0-45	18 Fr	3.0 cm	45 cm
8270-18-3.5-45	18 Fr	3.5 cm	45 cm

---

8270-22-1.5-45	22 Fr	1.5 cm	45 cm
8270-22-1.7-45	22 Fr	1.7 cm	45 cm
8270-22-2.0-45	22 Fr	2.0 cm	45 cm
8270-22-2.3-45	22 Fr	2.3 cm	45 cm
8270-22-2.5-45	22 Fr	2.5 cm	45 cm
8270-22-2.7-45	22 Fr	2.5 cm	45 cm
8270-22-3.0-45	22 Fr	3.0 cm	45 cm
8270-22-3.5-45	22 Fr	3.5 cm	45 cm

---