


## Mic-TJ transgastrisk jejunal ernæringssonde (2 løp)

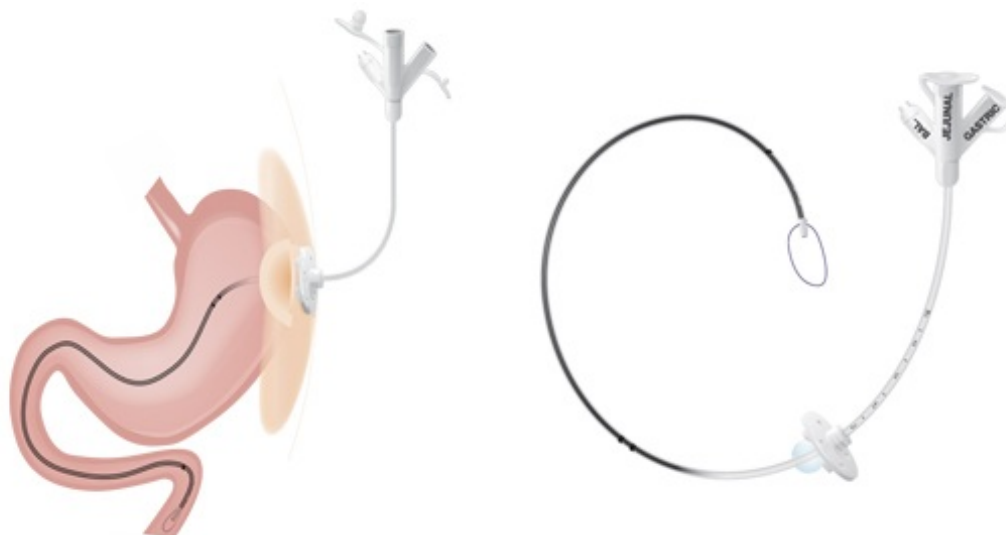

Mic-TJ har 2 løp: 1 til ventrikkel og 1 til jejunum. Sonden ser ut som en gastrostomitube. Man bør velge lengde på sonden med utgangspunkt i at den distale lengden kommer 10-15 cm forbi det Treitze ligament. Sonden har et langsgående lodd (det sorte området) som gjør sonden tyngre. Dette er med å forebygge at sonden kommer ut av posisjon/ «kryper oppover» til ventrikkel.

### Tabell

Artikkelnummer	Tykkelse	Jejunal lengde
650-16	16 Fr	45 cm
650-16-15	16 Fr	15 cm
650-16-22	16 Fr	22 cm
650-16-30	16 Fr	30 cm
650-18	18 Fr	45 cm
650-18-22	18 Fr	22 cm
650-18-30	18 Fr	30 cm
650-22	22 Fr	45 cm

